



Av. Lisandro de la Torre 2371, C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina
Tel.: 11 6967-4273 // 11 6073-6020
info@famox.com.ar
www.famox.com.ar



Acreditado por OAA



Acreditado por OAA



Acreditado por OAA



Acreditado por OAA

Indice



Unidades de Suministro	1
Panel de Cabecera	2
Panel de Gases	4
Columna de Quirófano	6
Columna Fija	8
Consola Giratoria	10
Brazo Suspendido	12
Isla de Neonatología	14
Panel Suspendido de Cirugía (Square)	16
Módulos	18
Accesorios de Unidad de Suministro	19
Cestos y Accesorios	20
Cestos	21
Accesorios	22
Soportes	23
Bandejas	24
Soportes	25
Soportes	26
Equipos	27
Alarma de Gases	28
Central Repetidora	29
Sistema de Llamado Inteligente de Enfermera	30
Llamador de Enfermera	31
Gasoterapia	34
Caudalímetro	35
Caudalímetro M3	38
Mezclador Aire/Oxígeno	41
Llave de Vacío	44
Regulador de Vacío	47
Regulador de Baja Presión	50
Regulador de Presión Ajustable	53
Regulador de Presión Pre-Ajustado	56
Regulador de Presión Pre-Ajustado con Caudalímetro	59
Aspirador Venturi	62
Recipiente Colector	65
Humidificador	68
Regulador de Baja Presión con Caudalímetro	71
Máscara Nasal	74
Accesorios de Gasoterapia	76
Conexiones	77
Unidades Terminales	78
Conectores de Entrada	80
Conectores para Manguera	82
Toma Dupla	84
Adaptaciones	86

Unidades de Suministro



Panel de Cabecera



Uso previsto:

Los paneles de cabecera de cama son dispositivos concebidos para otorgar al médico acceso cercano a suministros necesarios para terapéutica (Gases, vacío, energía eléctrica), brindando además al paciente servicios adicionales como iluminación, sistemas de comunicación y alarmas. Están destinados a los servicios de Cuidados Críticos (UTI y coronario), servicios de emergencia/reanimación, salas de complejidad intermedia y en general en cualquier sector hospitalario donde se requiera acceso a los mencionados servicios.

Producto médico habilitado por ANMAT PM-1207-1



**Acabado superficial en pintura poliéster
polvo epoxi antibacteriana y anodizado
natural, colores, tipos y texturas a
elección**



**Sistema de riel de servicio extrudado
Perfiles de aluminio extrudados
de matriz propia**



**Unidades terminales para gases médicos
fabricadas bajo norma internacional (DISS-
AFNOR-SS/AGA-ON-OHMEDA-C.U.)**



**Suministro eléctrico de media y baja
tensión bajo norma con cables 0
halógenos y tomacorrientes homologados IRAM**



**Perfiles difusores extrudados
de PVC cristal con protección UV**

Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

Normas de Seguridad Eléctrica IEC 601 (o su correspondiente IRAM 4220)

Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina

IRAM-ISO 7396-1: Sistemas de redes de gases medicinales comprimidos y vacío

UNE-EN 793: Requisitos particulares para la seguridad de las unidades de suministro médico


UNE-EN 737-1: Sistemas de distribución canalizado de gases medicinales. Parte 1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

ISO 9170-1: Terminal units for medical gas pipeline systems.

UNE 60601-1: Equipos electro médicos – requisitos generales para la seguridad.

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Panel de Gases

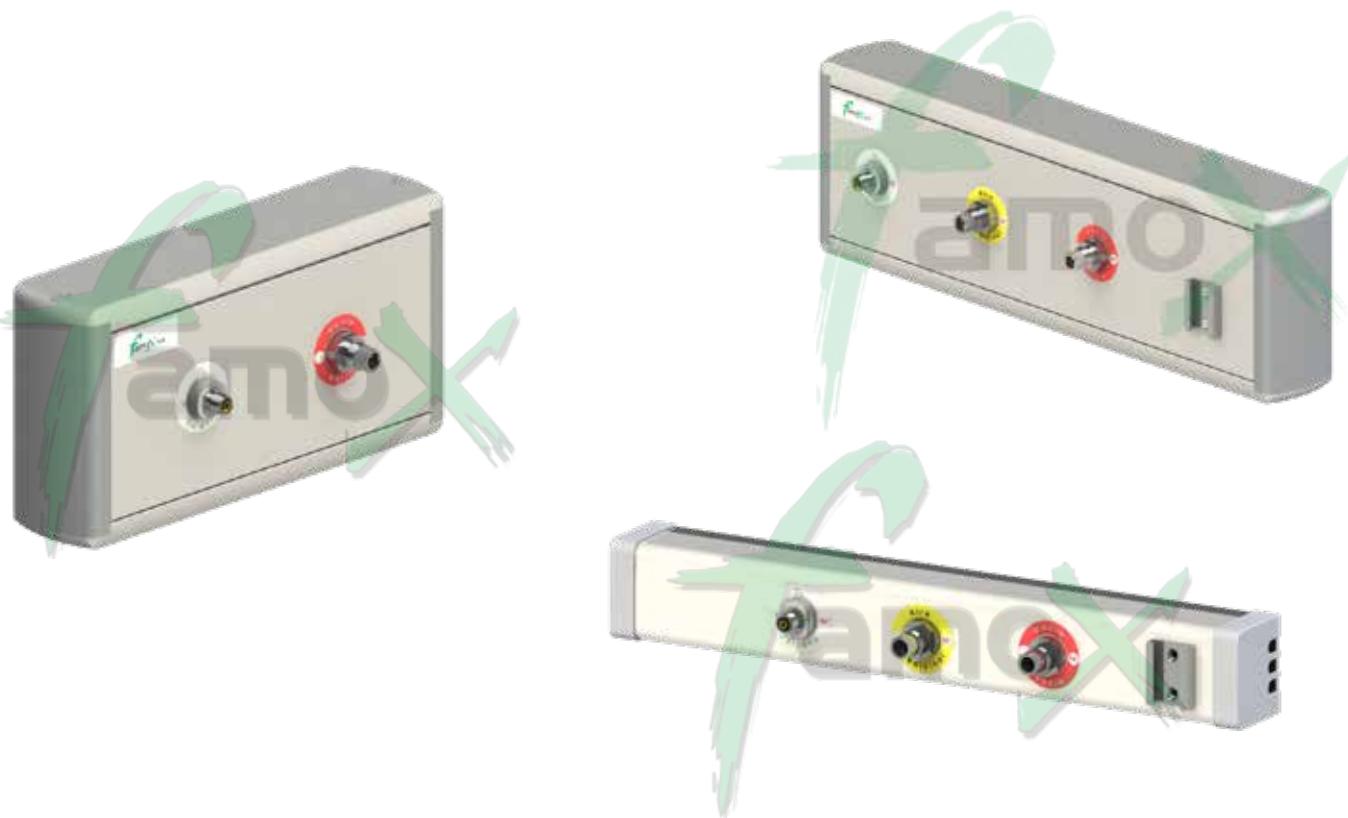

Uso previsto:

Los paneles de gases, también conocidos como ductos y miniductos, son dispositivos concebidos para otorgar al médico acceso cercano a suministros necesarios para la acción terapéutica. Destinado a todos aquellos sectores que requieran de las prestaciones del mismo.

Producto médico habilitado por ANMAT PM-1207-1



Panel de Gases



Punteras terminales laterales en PVC inyectadas y aluminio



Acabado superficial en pintura poliéster
polvo epoxi antibacteriana y anodizado
natural, colores, tipos y texturas a
elección

Unidades terminales para gases médicos
fabricadas bajo norma internacional (DISS-
AFNOR-SS/AGA-ON-OHMEDA-C.U.)

Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

Normas de Seguridad Eléctrica IEC 601 (o su correspondiente IRAM 4220)

Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina

IRAM-ISO 7396-1: Sistemas de redes de gases medicinales comprimidos y vacío

UNE-EN 793: Requisitos particulares para la seguridad de las unidades de suministro médico

UNE-EN 737-1: Sistemas de distribución canalizado de gases medicinales. Parte 1:

Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

ISO 9170-1: Terminal units for medical gas pipeline systems.

UNE 60601-1: Equipos electro médicos - requisitos generales para la seguridad.

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Columna de Quirófano



Uso previsto:

Las columnas de techo son dispositivos concebidos para otorgar al médico acceso cercano a suministros necesarios para terapéutica (Gases, vacío, energía eléctrica), brindando además la seguridad de contar con los mismos y mantener al perímetro de trabajo lo más libre para las tareas acordes. Poseen además de ser necesarios sistemas de comunicación y alarmas. Están destinados a los servicios de cirugía (quirófanos, salas de parto, quirófanos ambulatorios, etc.), y en general para aquellos sectores donde se requiera acceso a los mencionados servicios con dicha prestación.

Producto médico habilitado por ANMAT PM-1207-1



Columna de quirófano



Acabado superficial con pintura electrostática y antibacteriana



Ensamble a presión por clipeo entre perfiles



Toma de gases medicinales con frente propio



Platinas de fijación a losa



Módulo de servicios eléctricos y suministros de gases

Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

Normas de Seguridad Eléctrica IEC 601 (o su correspondiente IRAM 4220)

Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina

IRAM-ISO 7396-1: Sistemas de redes de gases medicinales comprimidos y vacío

UNE-EN 793: Requisitos particulares para la seguridad de las unidades de suministro médico

UNE-EN 737-1: Sistemas de distribución canalizado de gases medicinales. Parte 1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

ISO 9170-1: Terminal units for medical gas pipeline systems.

UNE 60601-1: Equipos electro médicos – requisitos generales para la seguridad.

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Columna Fija



Uso previsto:

Las columnas de techo son dispositivos concebidos para otorgar al médico acceso cercano a suministros necesarios para terapéutica (Gases, vacío, energía eléctrica), brindando además la seguridad de contar con los mismos y mantener al perímetro de trabajo lo más libre para las tareas acordes. Poseen además de ser necesarios sistemas de comunicación y alarmas. Están destinados a los servicios de cirugía (quirófanos, salas de parto, quirófanos ambulatorios, etc.), y en general para aquellos sectores donde se requiera acceso a los mencionados servicios con dicha prestación.

Producto médico habilitado por ANMAT PM-1207-1





Acabado superficial con pintura electrostática y antibacteriana

Toma de gas medicinal



Módulo de servicios eléctricos y suministros de gases



Platinas de fijación a losa



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

Normas de Seguridad Eléctrica IEC 601 (o su correspondiente IRAM 4220)

Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina

IRAM-ISO 7396-1: Sistemas de redes de gases medicinales comprimidos y vacío

UNE-EN 793: Requisitos particulares para la seguridad de las unidades de suministro médico

UNE-EN 737-1: Sistemas de distribución canalizado de gases medicinales. Parte 1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

ISO 9170-1: Terminal units for medical gas pipeline systems.

UNE 60601-1: Equipos electro médicos – requisitos generales para la seguridad.

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Consola Giratoria



Uso previsto:

La Consola Giratoria esta diseñada para proveerle al profesional médico una Unidad de Suministro que le permitirá acceder en áreas de Cuidados Críticos y/o Terapias Intermedias a realizar su tarea asistencial optimizando los espacios y recursos necesarios para la atención al paciente. Posee la versatilidad de poder adaptarse según requerimientos y en un espacio reducido. Su equipamiento considera las prestaciones de gases medicos, sistemas de evacuación, suministro de alimentación de baja y media tensión, señales debiles y monitorización, etc.

Producto médico habilitado por ANMAT PM-1207-1



Consola Giratoria



Acabado superficial con pintura electrostática y antibacteriana



Ensamble a presión por clípeo entre perfiles



Toma de gases medicinales con frentes propios



Platinas de fijación a losa



Módulo de servicios eléctricos y suministros de gases

Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

Normas de Seguridad Eléctrica IEC 601 (o su correspondiente IRAM 4220)

Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina

IRAM-ISO 7396-1: Sistemas de redes de gases medicinales comprimidos y vacío

UNE-EN 793: Requisitos particulares para la seguridad de las unidades de suministro médico

UNE-EN 737-1: Sistemas de distribución canalizado de gases medicinales. Parte 1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

ISO 9170-1: Terminal units for medical gas pipeline systems.

UNE 60601-1: Equipos electro médicos – requisitos generales para la seguridad.

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Brazo Suspendido



Uso previsto:

El Brazo articulado de suministro es un producto concebido para proveer al personal médico de una mayor comodidad, movilidad, desplazamiento en áreas críticas, facilitar dichas labores y optimizar las condiciones de seguridad permitiendo conformarse según el área asignada y cuya complejidad lo requiera. Según el equipamiento y la versión su uso será para: soportar y posicionar dispositivos médicos, monitores, etc., en un espacio reducido; y suministrar las prestaciones de media tensión, señales débiles, aire comprimido, aspiración, gases médicos, sistemas para evacuación de gases, etc.

Producto médico habilitado por ANMAT PM-1207-1



Brazo suspendido



Acabado superficial con pintura electrostática y antibacteriana



Ensamble a presión por clipeo entre perfiles



Toma de gases medicinales con frentes propios



Platinas de fijación a losa



Accesorios para fijación de equipos secundarios



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

Normas de Seguridad Eléctrica IEC 601 (o su correspondiente IRAM 4220)

Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina

IRAM-ISO 7396-1: Sistemas de redes de gases medicinales comprimidos y vacío

UNE-EN 793: Requisitos particulares para la seguridad de las unidades de suministro médico

UNE-EN 737-1: Sistemas de distribución canalizado de gases medicinales. Parte 1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

ISO 9170-1: Terminal units for medical gas pipeline systems.

UNE 60601-1: Equipos electro médicos - requisitos generales para la seguridad.

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Isla de Neonatología



Uso previsto:

Las Islas de Neonatología son productos concebidos para brindar al médico acceso cercano a suministros necesarios para su acción terapéutica (gases, vacío, energía eléctrica) en un área por demás crítica, brindando además servicios adicionales que permiten contener prestaciones secundarias (equipamiento electromédico) y trabajar sobre el neonato en su mesa de apoyo. Su configuración permite poder ser utilizada contra-muro o bien como su nombre lo indica en una Isla con soporte verticales Piso-Techo, la cantidad de puestos la determinará el cliente según su necesidad y superficie del área a instalar con un máximo de hasta 10 puestos. El sistema al ser realizado en su totalidad por perfiles de aluminio extrudado, es el que posibilita la versatilidad de su configuración, cuenta además con sistema de rieles verticales al cual se le podrá adosar todo tipo de accesorios de uso múltiple (porta bombas, porta sueros, canastos, luz de examinación, porta historia clínica, cajoneras, etc)

Producto médico habilitado por ANMAT PM-1207-1



Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica





Mesa de apoyo para usos múltiples



Rieles verticales adosados a sus laterales



Cobertores de terminación para un adecuado acabado de instalación del conjunto

Platinas de fijación a piso y losa



Perfiles de aluminio de extrusión



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

Normas de Seguridad Eléctrica IEC 601 (o su correspondiente IRAM 4220)

Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina

IRAM-ISO 7396-1: Sistemas de redes de gases medicinales comprimidos y vacío

UNE-EN 793: Requisitos particulares para la seguridad de las unidades de suministro médico

UNE-EN 737-1: Sistemas de distribución canalizado de gases medicinales. Parte 1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

ISO 9170-1: Terminal units for medical gas pipeline systems.

UNE 60601-1: Equipos electro médicos – requisitos generales para la seguridad.

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según AEA 90634-7-710 Grupo de aplicación 2b.

Panel Suspendido de Cirugía (Square)



Uso previsto:

El Panel Suspendido de Cirugía “Square” es un desarrollo totalmente innovador para facilitar en las áreas de Cirugía la posibilidad de contar con todos los elementos necesarios en un perímetro asociado para los profesionales del ámbito de referencia. Su diseño optimiza la disposición de los equipos al poder realizar el desplazamiento perimetral según necesidad durante las intervenciones quirúrgicas. Su equipamiento es totalmente configurable en dimensiones, altura y prestaciones. Facilita el agregado de equipamiento, los cuales deben utilizar los profesionales en dicha área (equipos de anestesiología, de laparoscopia, etc.), de manera suspendida y desplazable.

Producto médico habilitado por ANMAT PM-1207-1




Panel Suspended de Cirugía



Acabado superficial con pintura electrostática y antibacteriana



Sistema de riel de servicio extrudado

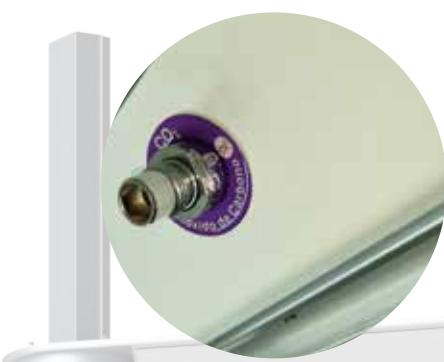

Perfiles de aluminio de extrusión



Ensamble a presión por clipeo entre perfiles



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

Normas de Seguridad Eléctrica **IEC 601** (o su correspondiente **IRAM 4220**)

Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina

IRAM-ISO 7396-1: Sistemas de redes de gases medicinales comprimidos y vacío

UNE-EN 793: Requisitos particulares para la seguridad de las unidades de suministro médico

UNE-EN 737-1: Sistemas de distribución canalizado de gases medicinales. Parte 1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

ISO 9170-1: Terminal units for medical gas pipeline systems.

UNE 60601-1: Equipos electro médicos - requisitos generales para la seguridad.

La parte eléctrica del panel deberá estar fabricada según **AEA 90634-7-710** Grupo de aplicación 2b.



Módulos para Unidades de Suministro

Media Tensión

DOBLE IRAM
SIMPLE IRAM
DOBLE IRAM ESTABILIZADO
SIMPLE IRAM ESTABILIZADO
DOBLE DIN
DOBLE IRAM-DIN
DOBLE DIN ESTABILIZADO
SIMPLE DIN
SIMPLE DIN ESTABILIZADO
TERMOMAGNÉTICA
TERMO+DISYUNTOR
RESERVA 2M

Iluminación

LUZ PACIENTE LED 5W
LUZ PACIENTE LED 9W
LUZ AMBIENTE LED 18W
LUZ NOCTURNA O CORTESIA LED RGB
LUZ NOCTURNA Bi-Pin LED Bca 6W

Baja Tensión

LLAMADO DE ENFERMERA
PARO CARDÍACO - GOLPE DE PUÑO
PARO CARDÍACO DIGITAL
PARO CARDÍACO DIGITAL + GOLPE DE PUÑO
DATOS RJ45 CAT6
TELEFONIA RJ11



Conexiones

Conektor	Gas
DISS	O2
AFNOR	AIRE
SS/AGA	N2O
OHMEDA	N2
ON	CO2
EVAC	VACIO
	OXÍGENO/AIRE




Accesorios de Unidad de Suministro






Accesorios de Unidad de Suministro

Cestos y Accesorios

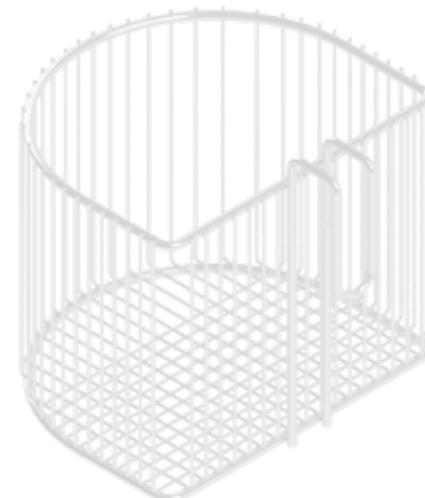

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica



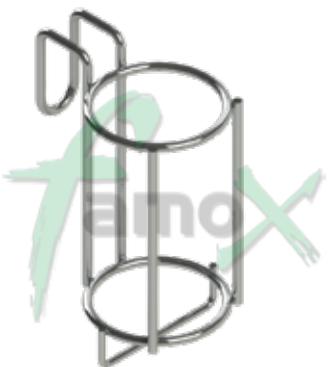

Cesto porta frasco 500cm³

CPO003

Carga máxima: 1kg

Espacio en riel: 250mm

Cesto porta frasco 1000cm³

CPO004



Carga máxima: 2kg

Espacio en riel: 250mm



Cesto porta tensiómetro


CPO005

Carga máxima: 750gr

Espacio en riel: 300mm

Cesto múltiples usos

CPO051

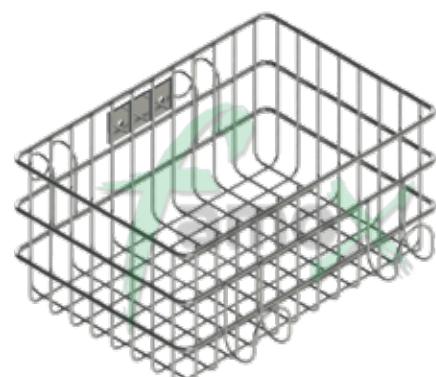

Carga máxima: 2kg

Espacio en riel: 325mm

Porta suero doble 'V'



CPO006

Carga máxima: 1kg


Espacio en riel: 250mm

Porta historia clínica

CPO007

Carga máxima: 500gr

Espacio en riel: 750mm

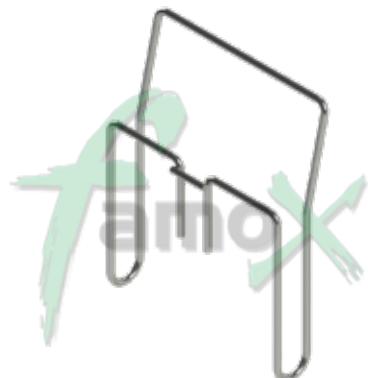

Gancho porta ambu tipo 'S'



CPO008

Carga máxima: 500gr

Espacio en riel: 250mm

Mini porta suero

CPO009


Carga máxima: 500gr

Espacio en riel: 170mm






Accesorios de Unidad de Suministro

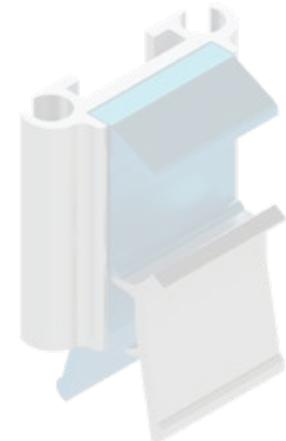

Soportes

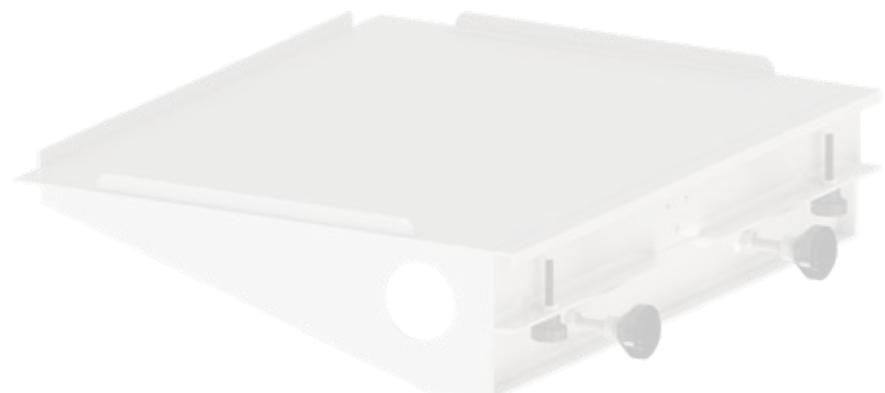



Bandeja porta monitor

SPO005

Carga máxima: 5kg

Espacio en riel: 450mm

Bandeja porta monitor para riel vertical

SPO029

Carga máxima: 5kg

Espacio en riel: 450mm



Bandeja porta monitor para riel horizontal

SPO036

Carga máxima: 5kg

Espacio en riel: 450mm

Soporte monitor panel

SPO030





Soporte suero 2 ganchos

SPO001

Carga máxima: 1kg

Espacio en riel: 200mm

Soporte bomba de infusión

SPO004

Carga máxima: 15kg

Espacio en riel: 200mm



Soporte bomba de infusión y porta sueros para riel vertical




SPO004

Carga máxima: 15kg

Espacio en riel: 200mm



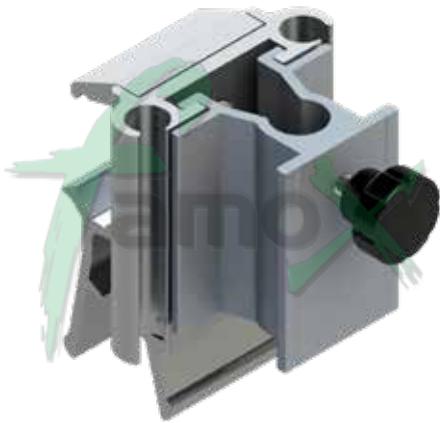

Soporte de lámpara con morza deslizable


SPO028

Espacio en riel: 60mm

Soporte deslizable con morza

SPO003

Espacio en riel: 60mm

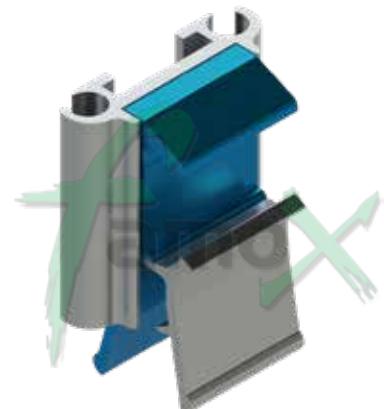

Soporte para accesorio fijo

SPO012

Espacio en riel: 35mm

Riel de pared

Medidas:

600mm SPO007

1200mm SPO008





Accesorios de Gasoterapia



Equipos




Alarma de Gases



Uso previsto:

La Alarma de Gases Digital es un equipo cuya finalidad es la de informar las variaciones en los rangos de presión de los diferentes gases utilizados en los distintos servicios hospitalarios. El equipo cuenta con un sensor de presión para medir dichas variaciones que se puedan llegar a generar, ya sea en redes primarias o secundarias, e informarlas mediante avisos sonoro-luminosos. Los valores indicados se pueden observar en su pantalla de cristal líquido de excelente visibilidad y los destellos y sonidos son emitidos mediante frecuencias y decibeles ajustados según norma, y la lectura detectada informará el estado de la presión de la red del gas medido. Posee además un teclado para realizar la puesta en marcha de la misma y efectuar todos los ajustes necesarios para su correcto funcionamiento.

Central Repetidora

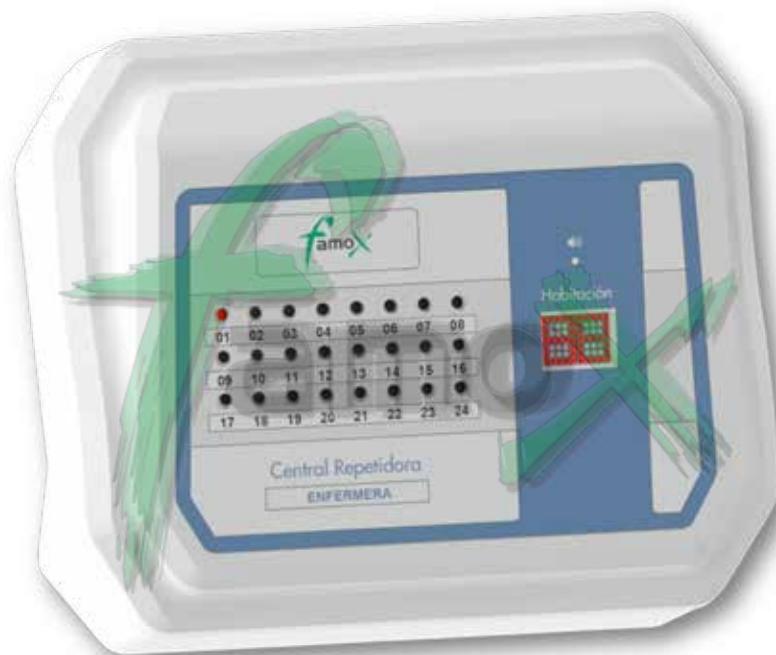

Uso previsto:

La Central Repetidora de Señales de 16-24PP es un equipo específico que sirve de interface principal entre paciente y personal sanitario y representa un sistema cuya finalidad es la de monitorear, recibir e informar los eventos de aquellas estaciones que poseen diversos módulos de señales y que pueden provenir de: cabeceras decamas, columnas, brazos, islas, etc. El equipo recibe una señal y emite ante cada una de ellas un alerta sonora – luminosa e indicativa. Puede almacenar desde 16 y hasta 24 puestos de señales entre Paciente – Enfermera.



Sistema de Llamado Inteligente de Enfermera



Llamador de Enfermera



Uso previsto:

El llamador de enfermera Yarward está pensado para informatizar el sistema de gestión y comunicación de la enfermera. Características: Diseñado para los usuarios de camas y soporte de estadísticas de los pacientes ingresados; llamada bidireccional entre paciente y el office sin necesidad de transferencia; unidad de Office sin interrupción, admite llamadas y visualizaciones en todo momento; permite el ajuste del volumen de las comunicaciones tanto en el Office como en la cabecera; función de configuración de números en línea; grabación de llamados; admite la transmisión de voz de los números y la configuración del volumen de soporte por período; permite adicionar pantalla de pasillo de llamadas; permite funciones de transmisión de música de fondo; en caso de fallas de red o PC el sistema aún puede realizar la llamada, la comunicación y emitir la alarma; Autocheck por defectos.

Modelos

Llamadores de Enfermera Yarward



Modelo	Módulos											
	Servidor interactivo de información	Servidor de atención médica	Terminal de cama	Handset	Terminal de puerta	Luz de corredor	Terminal de sala de servicio	Extensión de control de acceso	Estación de baño	Control multimedia de red	Unidad médica mobile	Transmisor inalámbrico
YHE-997S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
YHE-916S	X	X	X	X		X			X			X
YHE-968K		X	X	X		X			X			X

Llamador de Enfermera

Servidor de atención médica



Luz de Pasillo

Handset



Terminal de Cama



Servidor interactivo de información

09:31 11/28/2017 Tuesday

Monitoring

Extension

Setting

Emergency

503 Room: 01-05-BED

1022 Patient Name: Juan Pérez, Oct 20, 2017

Emergency

Patient Name

Room Name

Room Number

Patient Status

Patient Name

Room Name

Room Number

Patient Status

Handsfree Cancel

Nursing I: 0

Nursing II: 02

Nursing III: 08

Nursing IV: 10

Nursing V: 07

Nursing VI: 01

Nursing VII: 17

Call Storage: 02

Infusion in Progress: 35

Infusion Alarm: 0

Estación de Baño

Terminal de Acceso

Terminal de Cama

Display del pasillo

08:26:06 JUL 14 2020



Terminal de Puerta



Terminal de Sala de Servicio



Gasoterapia

famoxs.a.

anmat 
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica



Caudalímetro



Uso previsto:

Los caudalímetros son equipos empleados para seleccionar y controlar el caudal de gas medicinal a entregar en aplicaciones tales como la alimentación de respiradores mecánicos y oxígeno-terapia (por ejemplo: mediante una cánula nasal) a partir de una toma de conexión a la red de gas hospitalaria.

Rango de uso:

Disponemos equipos con escala de 0 a 3 l/min, de 0 a 15 l/min, de 0 a 30 l/min y de 0 a 100 l/min

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-2 (O2)**
PM-1207-10 (AIRE)



Cuerpo de latón pulido y cromado

Escalas de medición calibradas y controladas en cada partida de inyección con instrumental certificado



Tubo exterior/interior de policarbonato de alta resistencia



Eje de regulación de latón

Válvula de seguridad por sobrepresión



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

UNE-EN ISO 9170-1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

UNE EN ISO 15001: Equipo respiratorio y de anestesia. Compatibilidad con oxígeno.

UNE-EN ISO 15002: Dispositivos de medición del caudal para conexión a unidades terminales de sistemas de canalización de gases medicinales.

Códigos

Caudalímetro PCA




**DISS
AFNOR
SS/AGA
OHMEDA
ON
C.U.**

O2			
0-3	0-15	0-30	0-70
PCA002	PCA014	PCA149	PCA151
PCA026	PCA038	PCA153	PCA155
PCA050	PCA062	PCA157	PCA159
PCA074	PCA086	PCA161	PCA163
PCA098	PCA110	PCA165	PCA167
PCA124	PCA136	PCA169	PCA171

**DISS
AFNOR
SS/AGA
OHMEDA
ON
C.U.**

AIRE			
0-3	0-15	0-30	0-70
PCA008	PCA020	PCA150	PCA152
PCA032	PCA044	PCA154	PCA156
PCA056	PCA068	PCA158	PCA160
PCA080	PCA092	PCA162	PCA164
PCA104	PCA116	PCA166	PCA168
PCA130	PCA142	PCA170	PCA172

Caudalímetro M3

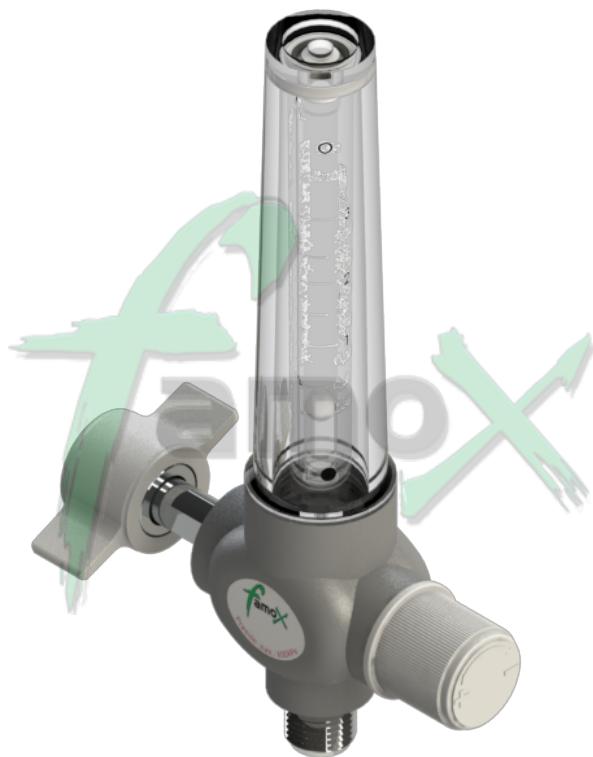

Uso previsto:

Los caudalímetros M3 están confeccionados con material de Ingeniería. El cuerpo principal es inyectado. Posee exactamente las mismas características que el Caudalímetro actual. Excelentes condiciones de resistencias a golpes y durabilidad.

Rango de uso:

Disponemos equipos con escala de 0 a 15 l/min y de 0 a 3 l/min.

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-2 (O2)**
PM-1207-10 (AIRE)

Caudímetro M3



Cuerpo de latón pulido y cromado

Escalas de medición calibradas y controladas en cada partida de inyección con instrumental certificado



Tubo exterior/interior de policarbonato de alta resistencia



Eje de regulación de latón

Válvula de seguridad por sobrepresión



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

UNE-EN ISO 9170-1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

UNE EN ISO 15001: Equipo respiratorio y de anestesia. Compatibilidad con oxígeno.

UNE-EN ISO 15002: Dispositivos de medición del caudal para conexión a unidades terminales de sistemas de canalización de gases medicinales.

Códigos

Caudalímetro M3 PCA



DISS
AFNOR
SS/AGA
OHMEDA
ON
C.U.

O2		AIRE	
0-3	0-15	0-3	0-15
PCA006	PCA018	PCA012	PCA024
PCA030	PCA042	PCA036	PCA048
PCA054	PCA066	PCA060	PCA072
PCA078	PCA090	PCA084	PCA096
PCA102	PCA114	PCA108	PCA120
PCA128	PCA140	PCA134	PCA146

Mezclador de Aire/Oxígeno



Uso previsto:

Las técnicas modernas de administración de Oxígeno definen que el mismo bien administrado produce beneficios, pero su falta o abuso puede producir daños, es por ello que se torna imprescindible contar con una dosificación adecuada y conocida del gas. A raíz de este requerimiento se desarrolló el mezclador automático de Aire / Oxígeno. El funcionamiento está basado en la igualación de presiones de aire y oxígeno por el sucesivo paso a través de membranas reductoras, la mezcla se realiza circulando por medio de agujas cónicas comandadas por una perilla en el frente.

Producto médico habilitado por ANMAT PM-1207-5



Mezclador de Aire/Oxígeno



**Cuerpo de aluminio
aleación compatible
con uso de oxígeno
medicinal**



**Funcionamiento de alarma
calibrada. Mezcla de gases
calibrada con instrumental
certificado**



**Agujas de regulación en acero
inoxidable**



Entrada y salida de gases DISS

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

UNE-EN ISO 9170-1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

UNE EN ISO 15001: Equipo respiratorio y de anestesia. Compatibilidad con oxígeno.

UNE-EN ISO 11195: Mezcladores de gases medicinales.

Códigos

Mezclador Aire/Oxígeno PMG

**PMG001**

Mezclador Aire/O₂
Alto Caudal

PMG002

Mezclador Aire/O₂
Bajo Caudal
sín Caudalímetro

PMG003

Mezclador Aire/O₂
Bajo Caudal
con Caudalímetro de
3 a 15 l/min

PMG004

Mezclador Aire/O₂
Bajo Caudal
con Caudalímetro de
0 a 3 l/min

PMG005

Mezclador Aire/O₂
Bajo Caudal con
Caudalímetro de
0 a 3 l/min ó
de 3 a 15 l/min

PMG006

Mezclador Aire/O₂
Alto Caudal
con Caudalímetro de
0 a 70 l/min

PMG007

Mezclador Aire/O₂
Bajo Caudal
con Caudalímetro de
0 a 30 l/min

PMG008

Mezclador Aire/O₂
Bajo Caudal con
Caudalímetro de
0 a 3 l/min y
de 3 a 30 l/min

Llave de Vacío



Uso previsto:

Las llaves de vacío son empleadas para dosificar el caudal de vacío entregado a partir de una toma de conexión de la red hospitalaria. Este equipo puede incluir un vacuómetro para la lectura de presión que se suministra, o puede ser suministrado sin el mismo, de acuerdo a la solicitud del cliente.

Producto médico habilitado por ANMAT PM-1207-9

Llave de vacuació



Cuerpo de nylon con
carga de alta resistencia



Salida de presión DISS normalizada



Perilla de regulación de
nylon de alta resistencia



Vacuómetro calibrado



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

UNE EN ISO 15001: Equipo respiratorio y de anestesia. Compatibilidad con oxígeno.

UNE-EN ISO 10079-3: Equipos de aspiración.

Códigos

Llave de Vacío
PLV



**DISS
AFNOR
SS/AGA
OHMEDA
ON**

SIN VACUÓMETRO

- PLV001
- PLV003
- PLV005
- PLV007
- PLV009

**DISS
AFNOR
SS/AGA
OHMEDA
ON**

CON VACUÓMETRO

- PLV002
- PLV004
- PLV006
- PLV008
- PLV010

Regulador de Vacío



Uso previsto:

El regulador de vacío permite ajustar con precisión una depresión a partir de una canalización de vacío del hospital. Su uso está previsto para todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos.

Rango de uso:

De 0 a -60 kPa

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-9**

Regulador de vacío



Cuerpo de nylon de alta resistencia

Perilla de regulación plástica de alto impacto



Sistema ON/OFF con corte de suministro



Vacuómetro calibrado



Salida de presión DISS normalizada



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

UNE EN ISO 15001: Equipo respiratorio y de anestesia. Compatibilidad con oxígeno.

UNE-EN ISO 10079-3: Equipos de aspiración.

Códigos


Reguladora de Vacío PRV



**DISS
AFNOR
SS/AGA
OHMEDA
ON**

-20 Kpa	-60 kPa
PRV006	PRV001
PRV007	PRV002
PRV008	PRV003
PRV009	PRV004
PRV010	PRV005

Regulador de Baja Presión

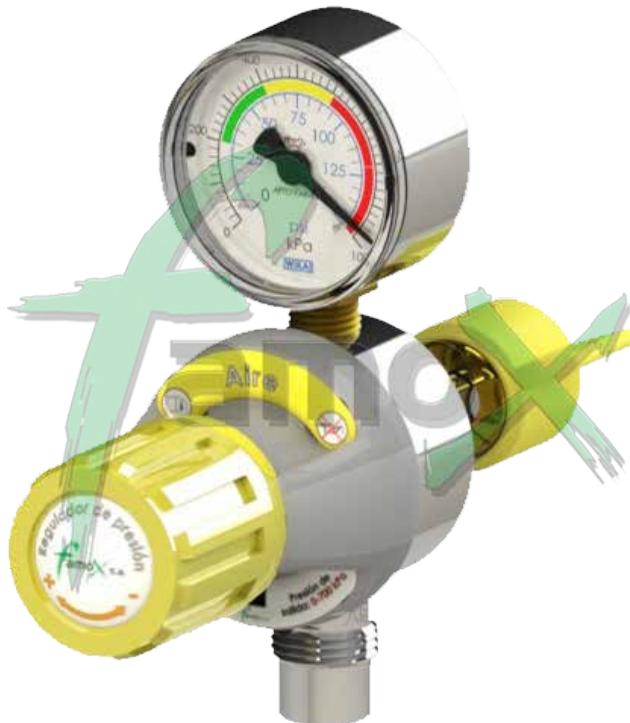

Uso previsto:

Los reguladores de baja presión para puesto están diseñados para regular de manera controlada y en la etapa terminal, la presión provista por un circuito de provisión de gases medicinales. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos.

Rango de uso:

De 0 a 1.000 kPa

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-4 (O2)**
PM-1207-15 (AIRE)

Regulador de Baja Presión



Cuerpo de latón pulido y cromado



Manómetro compatible con uso de oxígeno



Salida de presión normalizada DISS con pistón de cierre para evitar fugas

Diafragma con tela para mayor seguridad



Volante de regulación nylon de alta resistencia

Eje de regulación de acero



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

UNE-EN ISO 9170-1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

UNE EN ISO 15001: Equipo respiratorio y de anestesia. Compatibilidad con oxígeno.

UNE-EN ISO 10524-4: Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales.

Códigos

Regulador Baja Presión

PRB



**DISS
AFNOR
SS/AGA
OHMEDA
ON
C.U.**

O2	AIRE	N2O	N2	CO2
PRB001	PRB002	PRB003	PRB004	PRB005
PRB006	PRB007	PRB008	PRB009	PRB010
PRB011	PRB012	PRB013	PRB014	PRB015
PRB016	PRB017	PRB018	X	PRB019
PRB020	PRB021	PRB022	X	X
PRB023	PRB024	PRB025	PRB026	X

Regulador de Presión Ajustable



Uso previsto:

Están diseñados para reducir y regular de manera controlada la alta presión provista por un circuito de provisión de gases medicinales. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos.

Rango de uso:

De 0 a 22.500 kPa

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-3 (O2)**

PM-1207-11 (AIRE)

PM-1207-13 (CO2)

PM-1207-13 (N2O)

Regulador de Presión Ajustable



Cuerpo de latón pulido y cromado



Válvula de seguridad por sobrepresión



Manómetros compatibles con uso de oxígeno



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo


UNE-EN ISO 9170-1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

UNE EN ISO 15001: Equipo respiratorio y de anestesia. Compatibilidad con oxígeno.

UNE-EN ISO 10524-1: Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales.

Códigos

Regulador Ajustable PRA

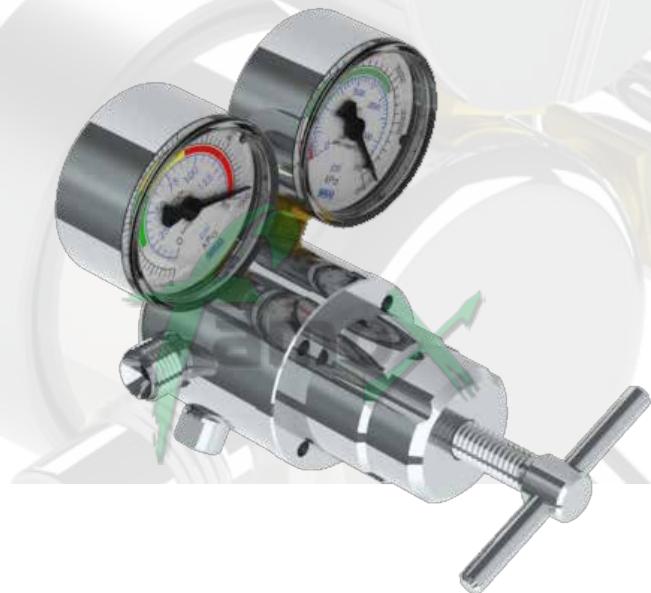

**IRAM
YUGO**

O2	AIRE	N2O	N2	CO2
PRA001	PRA002	PRA003	PRA004	PRA005
PRA006	PRA007	PRA008	PRA009	PRA010

Regulador de Presión Preajustado



Uso previsto:

Están diseñados para reducir de manera controlada la presión en un circuito de provisión de gases medicinales. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos. Su función es reducir la presión de salida del cilindro de alta presión aproximadamente a 350 kPa, controlando e indicando la carga remanente en el cilindro.

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-19 (O2)**
PM-1207-20 (AIRE)


Regulador de Presión Preajustado



Cuerpo de latón pulido y cromado



Manómetro compatible con uso de oxígeno

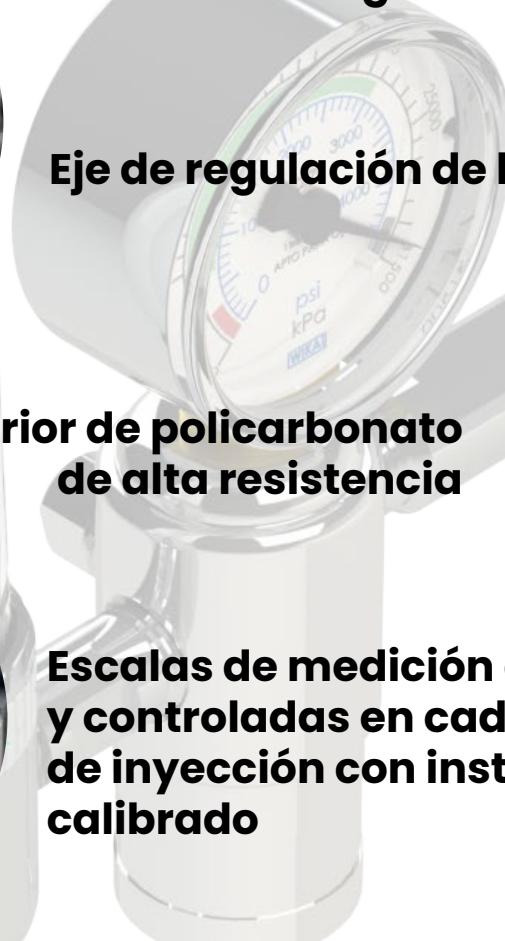

Eje de regulación de latón



Tubo exterior/interior de policarbonato de alta resistencia

Escalas de medición calibradas y controladas en cada partida de inyección con instrumental calibrado



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo


UNE-EN ISO 9170-1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

UNE EN ISO 15001: Equipo respiratorio y de anestesia. Compatibilidad con oxígeno.

UNE-EN ISO 10524-1: Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales.

Códigos

Reguladora Preajustada PRP

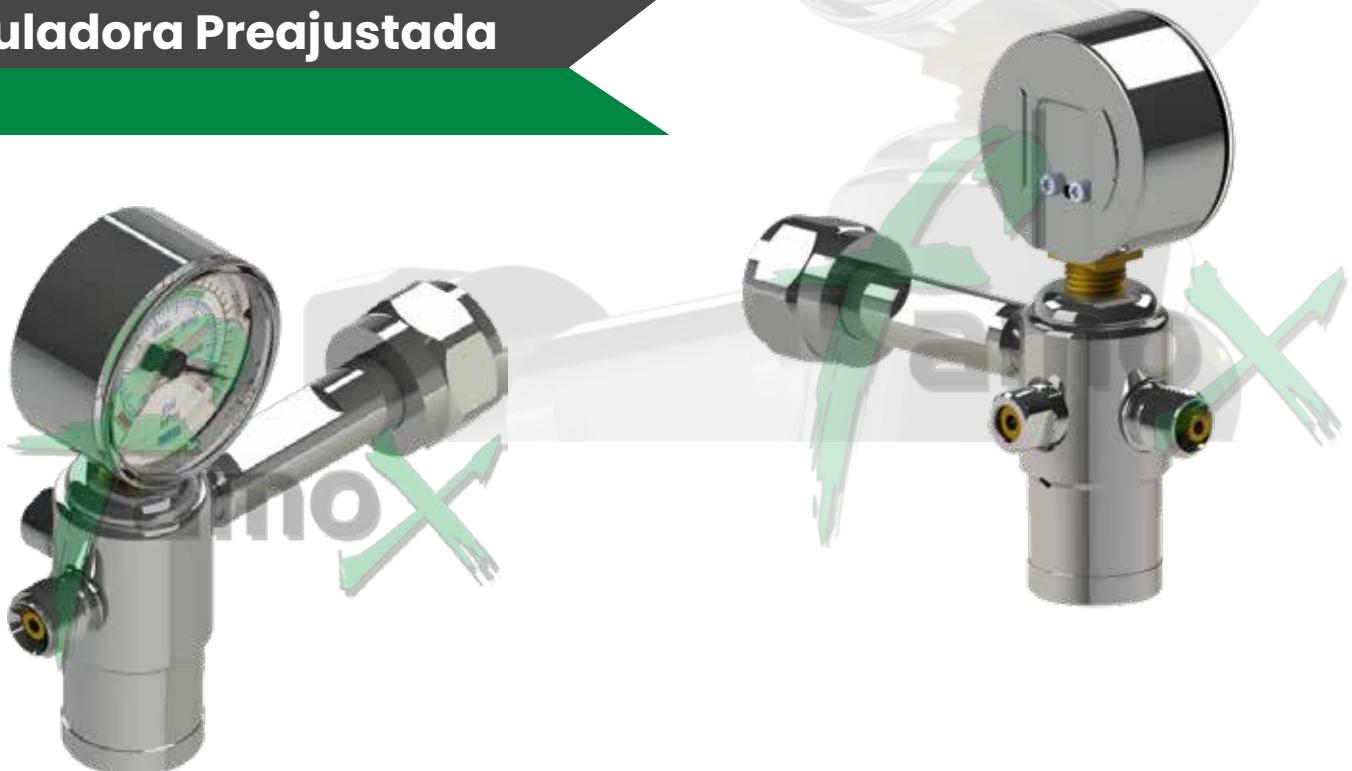

**IRAM
YUGO**

O2	AIRE	N2O	N2	CO2
PRP001	PRP001	PRP003	PRP004	PRP005
PRP006	PRP007	PRP008	PRP009	PRP010

Regulador de Presión Preajustado con Caudalímetro



Uso previsto:

Están diseñados para reducir de manera controlada la presión en un circuito de provisión de gases medicinales. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos. Su función es reducir la presión de salida del cilindro de alta presión aproximadamente a 350 kPa, controlando e indicando la carga remanente en el cilindro.

Rango de uso:

Disponemos equipos con escala de 0 a 15 l/min y de 0 a 3 l/min.

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-19 (O2)**
PM-1207-20 (AIRE)




Regulador de Presión Preajustado



Cuerpo de latón pulido y cromado



Manómetro compatible con uso de oxígeno

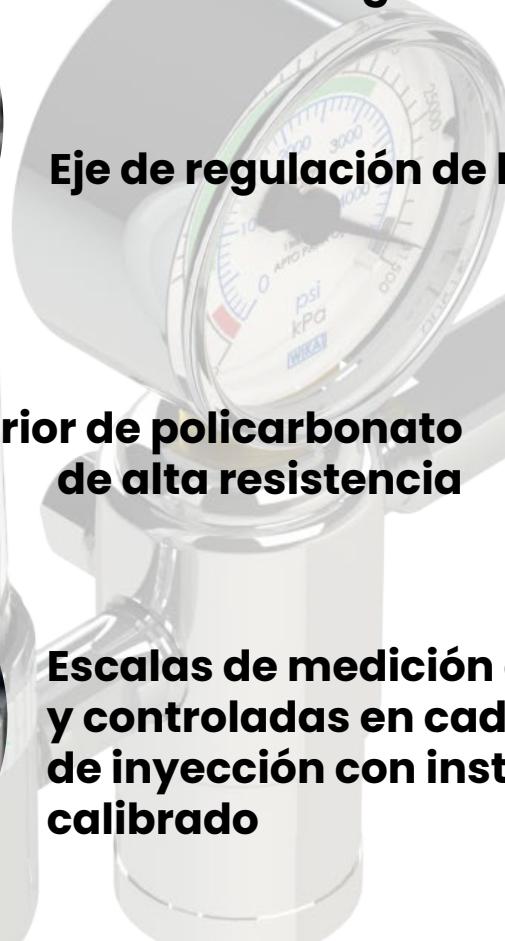

Eje de regulación de latón



Tubo exterior/interior de policarbonato de alta resistencia

Escalas de medición calibradas y controladas en cada partida de inyección con instrumental calibrado



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

UNE-EN ISO 9170-1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

UNE EN ISO 15001: Equipo respiratorio y de anestesia. Compatibilidad con oxígeno.

UNE-EN ISO 10524-1: Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales.

Códigos

Reguladora Preajustada con Caudalímetro PRP



**IRAM
YUGO**

O2		AIRE	
0-3	0-15	0-3	0-15
PRP011	PRP013	PRP015	PRP017
PRP012	PRP014	PRP016	PRP018

Aspirador Venturi



Uso previsto:

El sistema de Aspirador Venturi es empleado para proporcionar una fuente de alto vacío en áreas hospitalarias en las que sólo se disponga de aire comprimido u oxígeno. El equipo cuenta con un conector de entrada para aire u oxígeno (según solicitud de cliente) y su conector de salida es de vacío.

Rango de uso:

La presión de entrada es de 0 a 1000 kPa, y la presión de salida es de 0 a -80 kPa (vacío).

Producto médico habilitado por ANMAT

Aspirador Venturi



Cuerpo de aluminio compatible con uso medicinal



Salida de presión DISS normalizada



Perilla de regulación de nylon de alta resistencia



Vacuómetro calibrado



Perilla ON/OFF



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

UNE-EN ISO 9170-1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

UNE EN ISO 15001: Equipo respiratorio y de anestesia. Compatibilidad con oxígeno.

UNE-EN ISO 15002: Dispositivos de medición del caudal para conexión a unidades terminales de sistemas de canalización de gases medicinales.

Códigos

Aspirador Venturi PAV



**DISS
AFNOR
SS/AGA
OHMEDA
ON
C.U.**

O2
PAV001
PAV003
PAV005
PAV007
PAV009
PAV011

**DISS
AFNOR
SS/AGA
OHMEDA
ON
C.U.**

AIRE
PAV002
PAV004
PAV006
PAV008
PAV010
PAV012

Recipiente Colector



Uso previsto:

El recipiente colector de Famox S.A. se adapta a cualquier equipo que proporcione una adecuada aspiración de fluidos corporales. Posee una válvula de corte que es accionada cuando el líquido que ingresa en el interior del recipiente supera una determinada capacidad, imposibilitando así el ingreso del mismo a la red de suministro. Su uso está previsto para todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos.

Producto médico habilitado por ANMAT PM-1207-7



Receptáculo Colector



Conectores de aluminio anodizados



Tapa, vaso y flotante fabricado con nylon de alta resistencia



Compatible con proceso de esterilización por autoclave

Permiten ser esterilizados con vapor a una temperatura de 121 °C, durante 15 minutos máximo

Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

ISO 10079-3: Equipos de aspiración.

Códigos

Recipiente Colector PFR



PFR008

PFR013

PFR021



Conexión Superior
para manguera
Capacidad 500 cm³



Conexión Lateral
para manguera
Capacidad 1000 cm³



Conexión Intermediario
con filtro
Capacidad: 500 cm³

PFR009

PFR020

PFR022



Conexión Superior DISS
Capacidad 500 cm³



Conexión 90° con filtro
Capacidad: 500 cm³

Conexión Lateral DISS
con Llave Dosificadora
Capacidad: 500 cm³

Humidificador



Uso previsto:

Se adapta a cualquier equipo de oxigenoterapia, proporcionando la humedad requerida al aire u oxígeno respirado por el paciente, siendo parte de un circuito respiratorio. Los materiales que componen al equipo permiten que el mismo pueda ser esterilizado por autoclave. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluídas unidades de Terapia Intensiva y Quirófanos.

Producto médico habilitado por ANMAT PM-1207-6



anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica



Humidificador



Conectores de latón cromados

Tapa, vaso y pieza plástica fabricada con nylon de alta resistencia



Compatible con proceso de esterilización porautoclave

Permiten ser esterilizados con vapor a una temperatura de 121 °C, durante 15 minutos máximo

Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

ISO 8185: Humidificador del tracto respiratorio para uso médico

IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2: 1995 – Ed.2.2: Parte 1: Requisitos generales de seguridad de aparatos electromédicos. Anexo Parte 2: Requisitos particulares para los sistemas de humidificación respiratoria.



anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica



Códigos

Humidificador PFR



PFR001



O2



PFR002



AIRE

Reg. Baja con Caudalímetro



Uso previsto:

Los reguladores de baja presión para puesto están diseñados para regular de manera controlada y en la etapa terminal, la presión provista por un circuito de provisión de gases medicinales. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluidas unidades de terapia intensiva y quirófanos. Este equipo incluye a su salida un caudalímetro, permitiendo así seleccionar el flujo de salida

Rango de uso:

Disponemos equipos con escala de 0 a 15 l/min y de 0 a 1.000 kPa.

Producto médico habilitado por ANMAT **PM-1207-2 (O2)**
PM-1207-10 (AIRE)

Regulador de Baja Presión con Caudímetro



Normas aplicadas para el desarrollo y ensayo del equipo

UNE-EN ISO 9170-1: Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

UNE EN ISO 15001: Equipo respiratorio y de anestesia. Compatibilidad con oxígeno.

UNE-EN ISO 10524-4: Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales.

Códigos

Reguladora Baja Presión con Caudalímetro
PRP



DISS
AFNOR
SS/AGA
OHMEDA
ON
C.U.

O2	AIRE
PRB027	PRB028
PRB029	PRB030
PRB031	PRB032
PRB033	PRB034
PRB035	PRB036
PRB037	PRB038

Máscara Nasal



Uso previsto:

Se adapta a cualquier equipo de oxigenoterapia, proporcionando la humedad requerida al aire u oxígeno respirado por el paciente, siendo parte de un circuito respiratorio. Los materiales que componen al equipo permiten que el mismo pueda ser esterilizado por autoclave. Su uso está previsto en todas las áreas hospitalarias que requieran su aplicación, incluídas unidades de Terapia Intensiva y Quirófanos.

Producto médico habilitado por ANMAT PM-1207-16



Códigos

Máscara Nasal PMA



PMA002

Tamaño MS

PMA003

Tamaño M



Accesorios de Gasoterapia




anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica





Accesorios de Gasoterapia

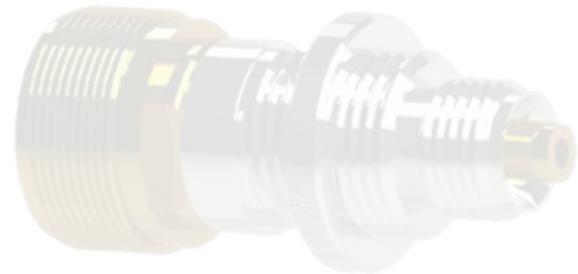

Conexiones



Unidades Terminales



U. T. M1 DISS



U. T. M2 AFNOR



U. T. M2 SS/AGA



U. T. OHMEDA



U. T. M2 DISS

Uso previsto:

Las Unidades Terminales son los puntos de un sistema de canalización de gases medicinales en los que el operador efectúa las conexiones para el suministro de gases medicinales especificados a los aparatos de anestesia, respiradores pulmonares u otras unidades de equipo médico. Normas de conexión disponibles: DISS, AFNOR, SS/AGA y OHMEDA.

Códigos


Unidades Terminales

PUT



UNIDADES TERMINALES					
GAS	UT M2 DISS	UT M2 AFNOR	UT M2 SS/AGA	UT M1 DISS	UT OHMEDA
OXIGENO	PUT064	PUT072	PUT017	PUT001	PUT042
AIRE	PUT065	PUT073	PUT018	PUT002	PUT043
VACIO	PUT066	PUT074	PUT019	PUT003	PUT044
N2O	PUT067	PUT075	PUT020	PUT004	PUT045
N2	PUT068	PUT076	PUT021	PUT005	X
CO2	PUT069	PUT077	PUT022	PUT006	X
IAIRE	PUT070	PUT078	PUT023	PUT008	X
EVAC	PUT071	X	X	PUT009	X

Conectores de Entrada

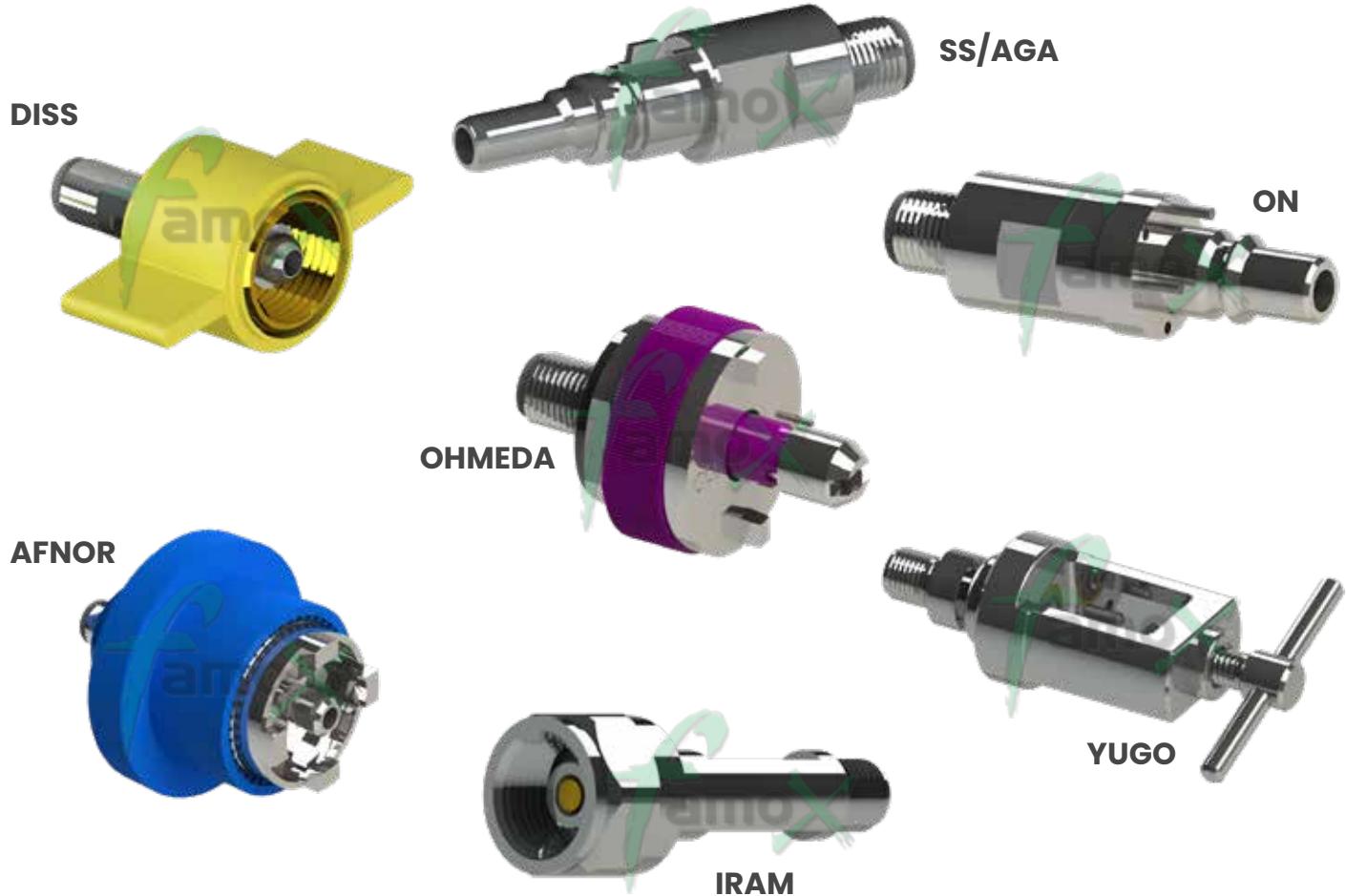


Uso previsto:

Los conectores de entrada son aquellos que se utilizan para la entrada de los equipos de gasoterapia, para realizar una correcta conexión a un sistema de canalización de gases medicinales.
Conecotores para baja presión disponibles: DISS, AFNOR, SS/AGA, OHMEDA y O.N. Conecotores para alta presión: IRAM y YUGO

Códigos

Conectores de Entrada SCO

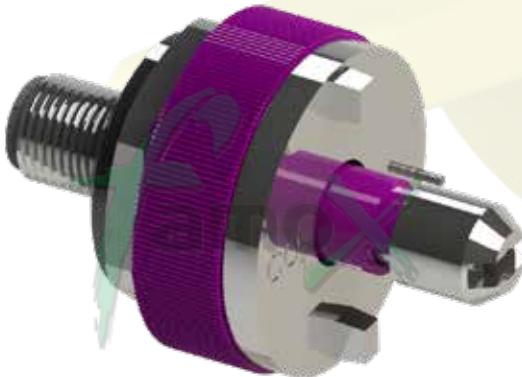

GAS	DISS	AFNOR	SS/AGA	OHMEDA	ON	IRAM	YUGO
OXIGENO	SCO001	SCO010	SCO017	SCO028	SCO024	SCO040	SCO044
AIRE	SCO002	SCO011	SCO018	SCO029	SCO025	SCO041	SCO045
VACIO	SCO003	SCO012	SCO019	SCO030	SCO026	X	X
N2O	SCO004	SCO013	SCO020	SCO031	SCO027	SCO042	SCO046
N2	SCO005	SCO014	SCO021	X	X	SCO043	X
CO2	SCO006	SCO015	SCO022	SCO032	X	SCO043	SCO047
IAIRE	SCO007	SCO016	SCO023	X	X	X	X
EVAC	SCO008	X	X	X	X	X	X

Conec**t**ores para Manguera



Manguera AFNOR



Manguera DISS Bronce



Manguera DISS



DISS Plástico



90° AFNOR



90° DISS


Uso previsto:

Los conectores para manguera son aquellos utilizados para la conexión de un terminal bajo norma junto a una manguera. Los mismos pueden ser rectos o a 90°.

Códigos

Conectores para Manguera

SCO

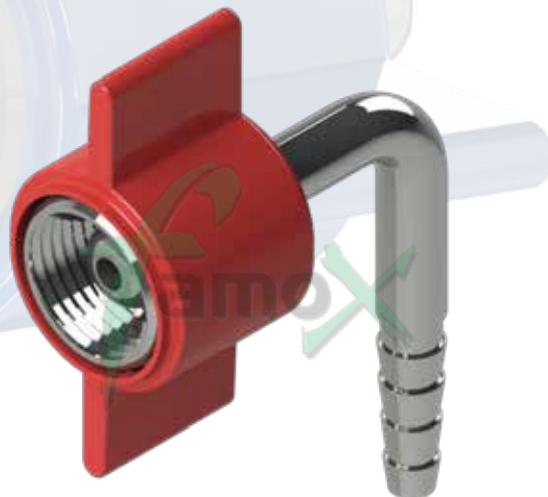


CONECTOR RECTO PARA MANGUERA

GAS	DISS PLASTICO	DISS BRONCE	DISS	AFNOR
OXIGENO	SCO123	SCO048	SCO126	SCO135
AIRE	SCO124	SCO049	SCO127	SCO136
VACIO	X	SCO050	SCO128	SCO137
N2O	X	SCO051	SCO129	SCO138
N2	X	SCO052	SCO130	SCO139
CO2	X	SCO053	SCO131	SCO140
IAIRE	X	SCO054	SCO132	SCO141
EVAC	X	SCO055	SCO133	X

CONECTOR 90° PARA MANGUERA

GAS	DISS	AFNOR
OXIGENO	SCO057	SCO066
AIRE	SCO058	SCO067
VACIO	SCO059	SCO068
N2O	SCO060	SCO069
N2	SCO061	SCO070
CO2	SCO062	SCO071
IAIRE	SCO063	SCO072
EVAC	SCO064	X

Toma-Dupla

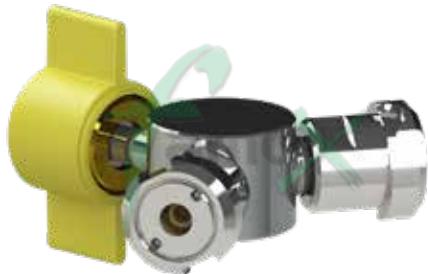

Entrada DISS / Salida AFNOR




Entrada SS/AGA / Salida DISS



Entrada AFNOR / Salida DISS



Entrada ON / Salida DISS

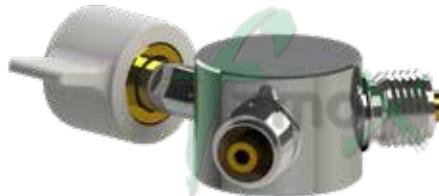

Entrada DISS / Salida DISS



Entrada AFNOR / Salida AFNOR

Uso previsto:

Los conectores "Toma dupla" sirven para la ampliación de conexiones de una unidad terminal, pasando de la disponibilidad de una a dos. Hay muchas variantes dentro de este artículo, ya que el mismo puede ser con conector de entrada bajo una norma, y salidas de presión bajo otra norma.

Códigos

**Toma Dupla
PUT**



TOMA DOBLE ENTRADA/SALIDA

GAS	DISS DISS	DISS AFNOR	AFNOR AFNOR	AFNOR DISS	ON DISS	SS/AGA DISS
OXIGENO	PUT048	PUT088	PUT057	PUT079	PUT130	PUT134
AIRE	PUT049	PUT089	PUT058	PUT080	PUT131	PUT135
VACIO	PUT050	PUT090	PUT059	PUT081	PUT132	PUT136
N2O	PUT051	PUT091	PUT060	PUT082	PUT133	PUT137
N2	PUT052	PUT092	PUT061	PUT083	X	PUT138
CO2	PUT053	PUT093	PUT062	PUT084	X	PUT139
IAIRE	PUT054	PUT094	PUT063	PUT085	X	X
EVAC	X	X	X	X	X	X


Adaptaciones



DISS M1 a Bloque Base AGA M1



DISS M1 a Bloque Base ON

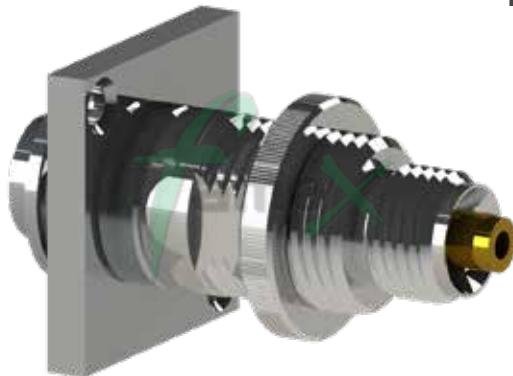

DISS M1 a Bloque Base AFNOR M1

Uso previsto:

Contamos con adaptaciones de unidades terminales para todas las normas. De esta forma, usted podrá adaptar su antigua unidad terminal a una que crea más conveniente.

Códigos

Adaptaciones SUT



GAS	DISS M1 A BLOQUE BASE AFNOR M1	DISS M1 A BLOQUE BASE ON	DISS M1 A BLOQUE BASE AGA
OXIGENO	SUT096	SUT114	SUT120
AIRE	SUT097	SUT115	SUT121
VACIO	SUT098	SUT116	SUT122
N2O	SUT099	X	SUT123
N2	SUT100	X	SUT124
CO2	SUT101	X	SUT125
IAIRE	X	X	SUT126
EVAC	X	X	X



www.famox.com.ar

Av. Lisandro de la Torre 2371, C.A.B.A.

Buenos Aires - Argentina

Tel.: 4687-8417 // 6073-6020

info@famox.com.ar